

WINSTA-FiT



Fibula und Tibia Plattensystem

Das WINSTA-FiT Fibula und Tibia Plattensystem ist ein neuartiges multiaxiales Platten-/Schraubenkonzept. Das anatomische Design ermöglicht die sichere Fixierung der distalen Fibula und Tibia.

Die sehr flachen winkelstabilen / multiaxialen Formplatten können mit Ø 2.7 / 3.5 mm winkelstabilen Kortikalis- sowie winkelstabilen Spongiosaschrauben besetzt werden.

WINSTA-FiT


Distale Tibiaplatte anterolateral

Für komplexe intra- und
extraartikuläre Frakturen

Distale abgeflachte Fase für
leichteres Einschieben der Platte

Das Langloch erlaubt eine
axiale Kompression

Flaches Plattenprofil im
metaphysären Knochen, an
dem oft eine schlechte
Weichteildeckung vorliegt

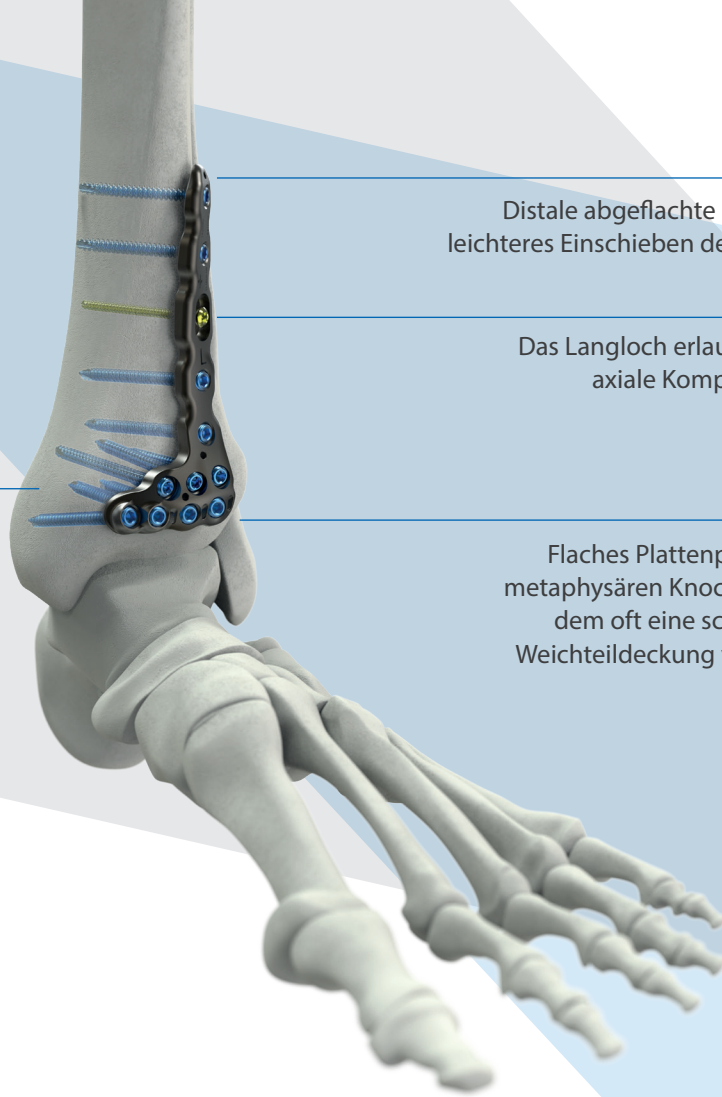

WINSTA-FiT

Distale Tibiaplatte medial



Freie Wahl der Schraubendimension
Ø 2.7 mm, 3.5 mm und 4.0 mm

Durch die Verwendung der multiaxialen
Schraubentechnik kann eine
Abstützung nach Rekonstruktion der
Gelenkfläche erzielt werden

WINSTA-FiT

Distale Tibiaplatte posterior



Als Antigleitplatte zur posterioren
Fixierung einsetzbar


WINSTA-FiT

Distale Fibulaplatte lateral

Die gewünschte Plattenlänge wird mit Hilfe der Probeimplantate festgelegt


Sichere temporäre Fixierung der Platte durch Ø 1.6 mm Kirschnerdrähte

Syndesmose-Schraube:
Fixation der Syndesmose durch das Langloch möglich

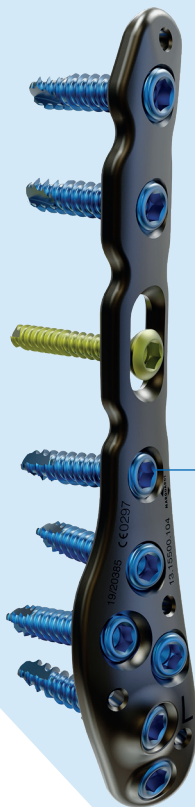

Durch das Plattenprofil werden alle Schraubenköpfe im Plattenloch versenkt

WINSTA-FiT Fibula und Tibia Plattensystem

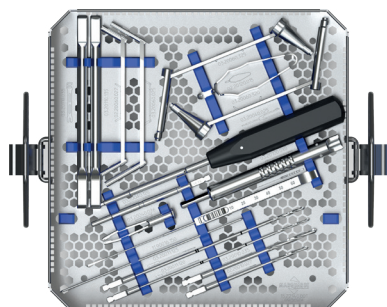

WINSTA-FiT Instrumente



WINSTA-FiT Distale Tibiaplatte, anterolateral

13.15200.1xx(S) links 13.15200.0xx(S) rechts

Lochanzahl 5-15

Länge 88-229 mm



WINSTA-FiT Distale Tibiaplatte, medial

13.15100.1xx(S) links 13.15100.0xx(S) rechts


Lochanzahl 5-15

Länge 95-227 mm




Kortalisschrauben Ø 2.7 mm, selbstschneidend

03.03527.0xx(S) Länge 12-50 mm

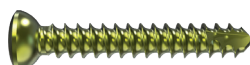

Kortalisschrauben Ø 3.5 mm, selbstschneidend

03.03612.0xx(S) Länge 12-80 mm

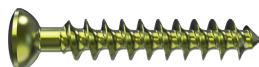

Spongiaschrauben Ø 4.0 mm

03.01640.0xx(S) Länge 12-60 mm



WINSTA-FiT Probeimplantate

13.15xxx.xxx 1 = Implantat

13.25xxx.xxx 2 = Probeimplantat

Probeimplantate sind für alle Plattentypen erhältlich



WINSTA-FiT Distale Tibiaplatte, posterior

13.15300.00x(S)

Lochanzahl 3, 6

Länge 49, 87 mm



WINSTA-FiT Distale Fibulaplatte, lateral

13.15500.1xx(S) links 13.15500.0xx(S) rechts


Lochanzahl 4-10

Länge 79-156 mm




WS Kortalisschrauben Ø 2.7 mm, selbstschneidend

03.05527.0xx(S) Länge 12-60 mm

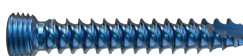

WS Kortalisschrauben Ø 3.5 mm, selbstschneidend

03.05612.0xx(S) Länge 12-80 mm

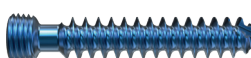

WS Spongiaschrauben Ø 4.0 mm, selbstschneidend

03.05640.0xxS Länge 12-80 mm

Sie finden uns auch in den sozialen Netzwerken:



Vertrieb durch Marquardt axomed

Heinrich-von-Stephan-Str. 5c • 79100 Freiburg • Telefon +49 761 611 66-0 • Telefax +49 761 611 66-11 • info@marquardt-axomed.de • www.marquardt-axomed.de

Hinweis:

Diese Beschreibung ist zur sofortigen Anwendung des Instrumentariums nicht ausreichend. Weitere Informationen erhalten Sie in der ausführlichen OP-Anleitung. Wartung, Pflege und Aufbereitung von Marquardt Instrumenten können der entsprechenden Anleitung entnommen werden.