


# VITUS-Fi

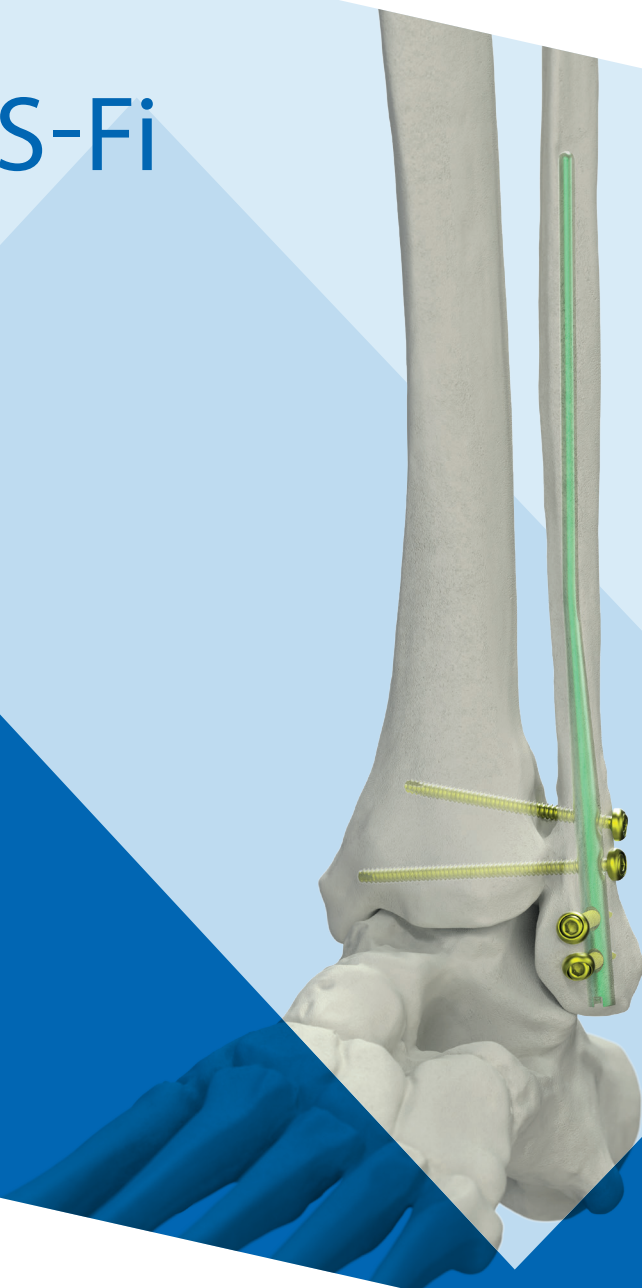

## Fibula Nagelsystem

Das Marquardt VITUS-Fi Fibula Nagelsystem ist für die Versorgung von distalen Fibulafrakturen im Rahmen einer Unterschenkelfraktur und gering bis mäßig dislozierte distale Fibulafrakturen im Rahmen einer oberen Sprunggelenksfraktur entwickelt worden. Das VITUS-Fi Fibula Nagelsystem dient zur stabilen Fixierung und weichteilschonenden Versorgung von distalen Fibulafrakturen.

Besonders wenn die Weichteile beeinträchtigt sind und die Wundheilung im Mittelpunkt der Therapie steht. Minimale Inzisionen und eine stabile Fixierung haben das Ziel einer möglichst kurzen Immobilisierung des Patienten.

# VITUS-Fi

## Fibula Nagelsystem

Minimalinvasives,  
weichteilschonendes Verfahren


ovaler Querschnitt

Anatomisch ovales  
proximales Nageldesign

Laterale Schrauben  
divergierend

Vergrößerter Schraubenstand,  
zwei Stellschrauben sind möglich


Modulare Unterlegscheibe,  
flächige Auflage

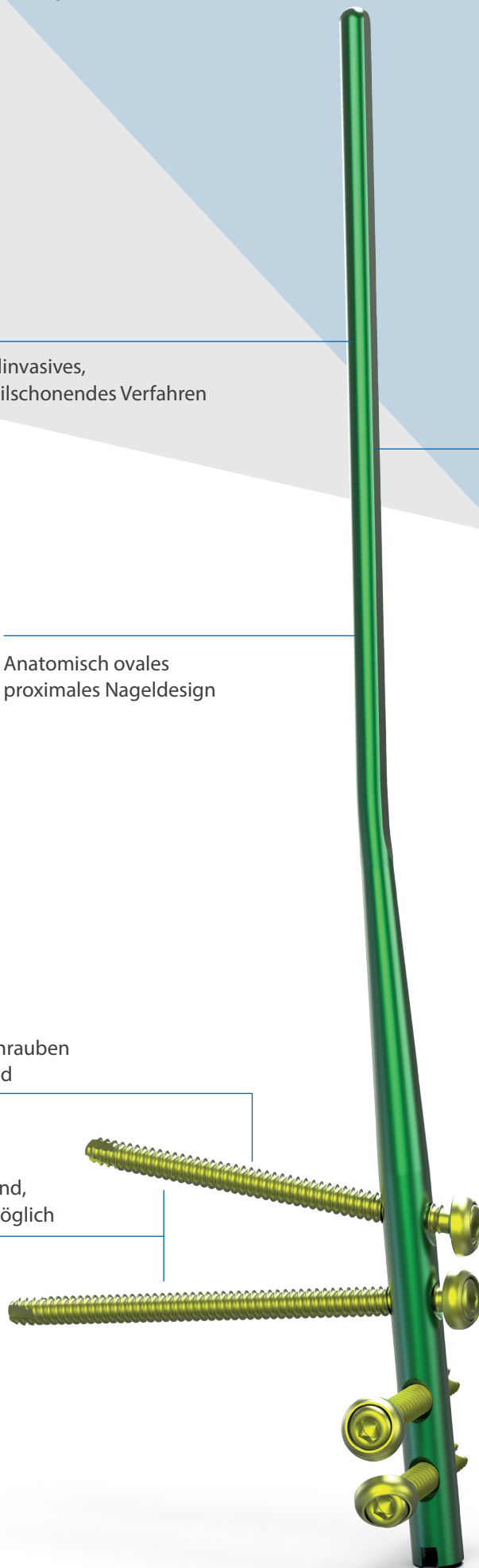




### **Modulare Unterlegscheibe**

Die modulare Unterlegscheibe bietet eine sichere, formschlüssige Kraftübertragung auf die Kortikalis. Dadurch wird eine druckverteilte Fixierung der Fragmente gewährleistet.

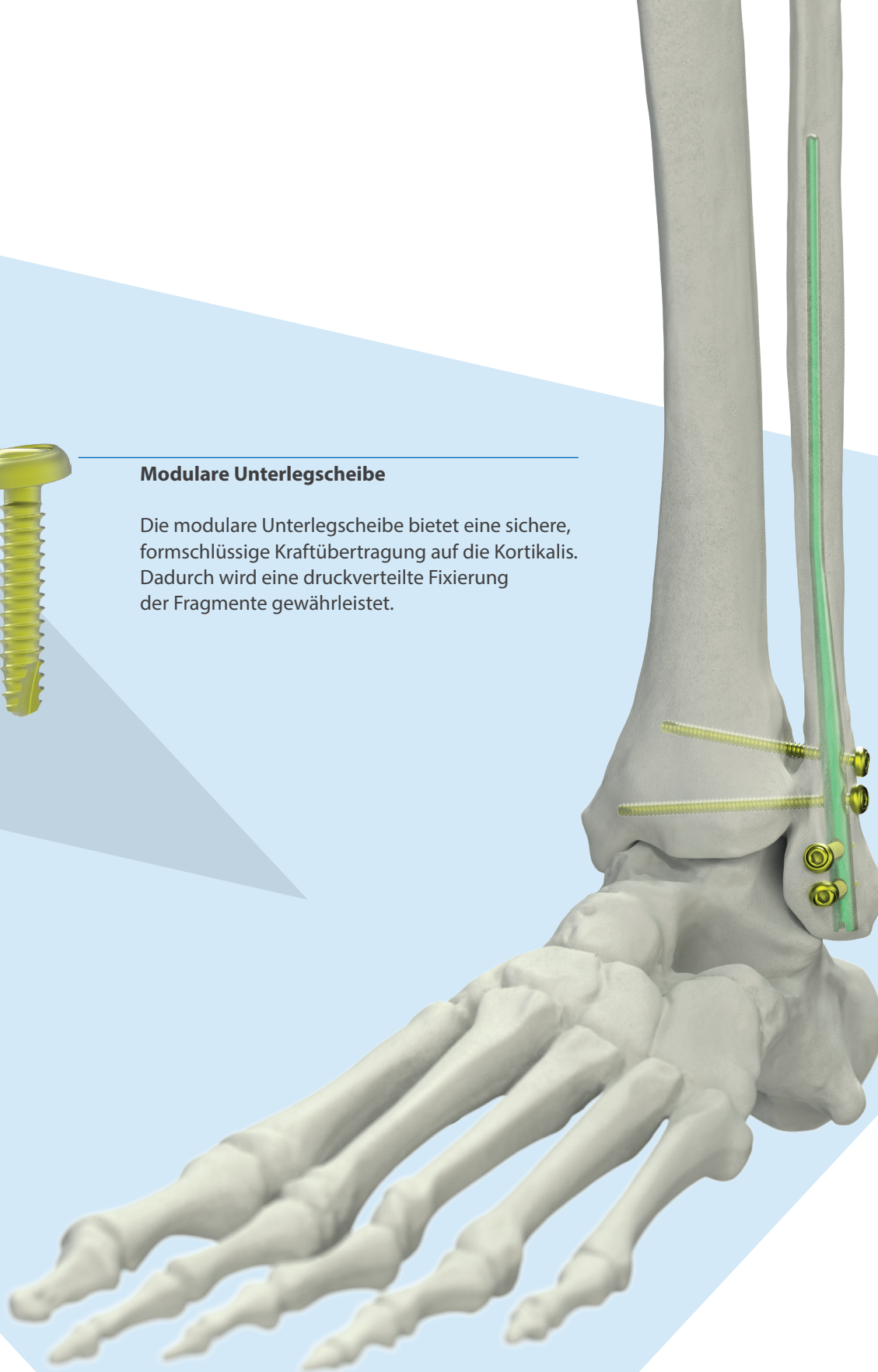

# VITUS-Fi

## Fibula Nagelsystem

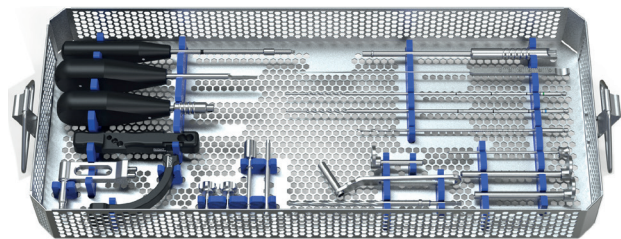

### VITUS-Fi Instrumente



#### VITUS-Fi Distaler Fibulanagel Ø 3.0 mm

09.63030.1XXS

Länge 110, 145 and 180 mm



#### VITUS-Fi Distaler Fibulanagel Ø 3.6 mm

09.63036.1XXS

Länge 110, 145 and 180 mm



#### Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm

09.31635.XXXS

Länge 10-60 mm



#### Verschlusschraube Ø 6.0 mm

09.63006.005S

Länge 5 mm

Sie finden uns auch in den sozialen Netzwerken:



Vertrieb durch Marquardt axomed

Heinrich-von-Stephan-Str. 5c • 79100 Freiburg • Telefon +49 761 611 66-0 • Telefax +49 761 611 66-11 • [info@marquardt-axomed.de](mailto:info@marquardt-axomed.de) • [www.marquardt-axomed.de](http://www.marquardt-axomed.de)

#### Hinweis:

Diese Beschreibung ist zur sofortigen Anwendung des Instrumentariums nicht ausreichend. Weitere Informationen erhalten Sie in der ausführlichen OP-Anleitung. Wartung, Pflege und Aufbereitung von Marquardt Instrumenten können der entsprechenden Anleitung entnommen werden.